

前面板没有 USB 口的仪器固件升级

主要软件: [Flashwizard](#)

主要软件版本:C12

主要软件修正版本:N/A

次要软件及驱动:N/A

问题:吉时利前面板没有 USB 口的仪器怎么进行固件升级?

解答: 此类前面板没有 USB 口的仪器, 可以通过 Flashwizard 软件来升级, 本文以 6487 为例讲述具体如何操作。(此方法适用于 Keithley 2182A 型纳伏表、2300 系列、2400 系列 SMU、2700 系列数据采集系统、6200 系列超灵敏电流源 6500、6430 系列高电阻/低电流静电计和 6400 系列皮安表)

1. 从 TEK 官网 <https://www.tek.com.cn/> 下载 Flashwizard 软件和固件文件, 解压固件文件备用, 在电脑上安装 Flashwizard 软件 (C12 版本亲测可以在 win 10 系统正常使用)
2. 用 GPIB 线连接仪器和电脑 (确保仪器 GPIB 接口处于开启状态, GPIB 口使用起来比较方便)
3. 打开 flashwizard 软件




点击 next

关注我们: cn.tek.com   




4. 选择对应的通信接口（根据实际使用接口和转接线厂家选择），点击 next

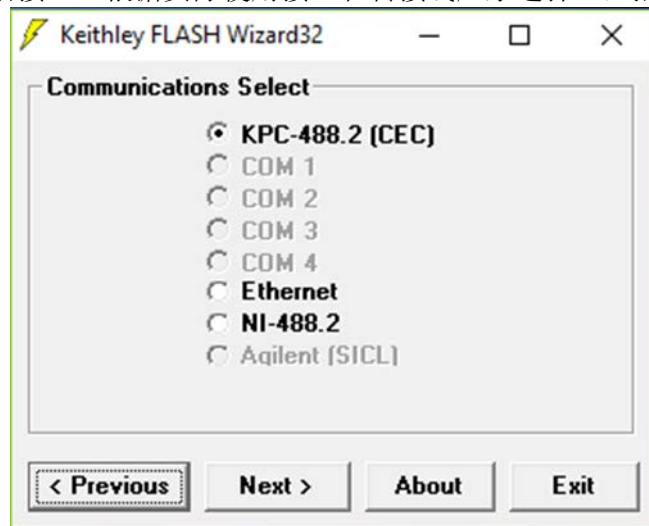


5. 点击 next



6. 软件会自动识别出仪器, 点击 next

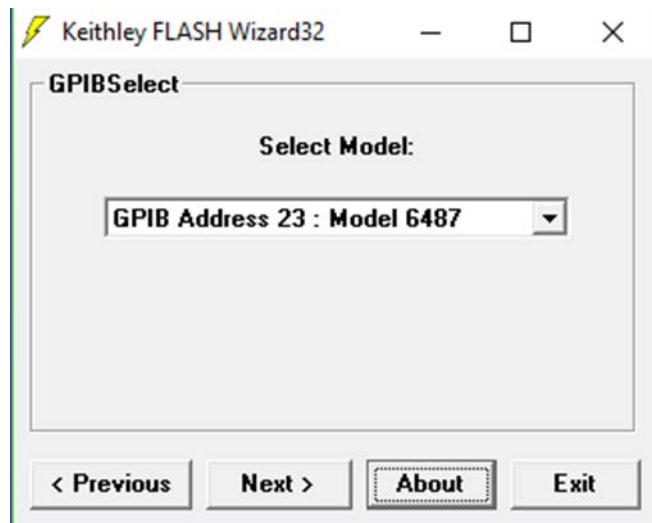


7. 点击 next 选择解压后的固件文件, 固件文件以 .x 结尾

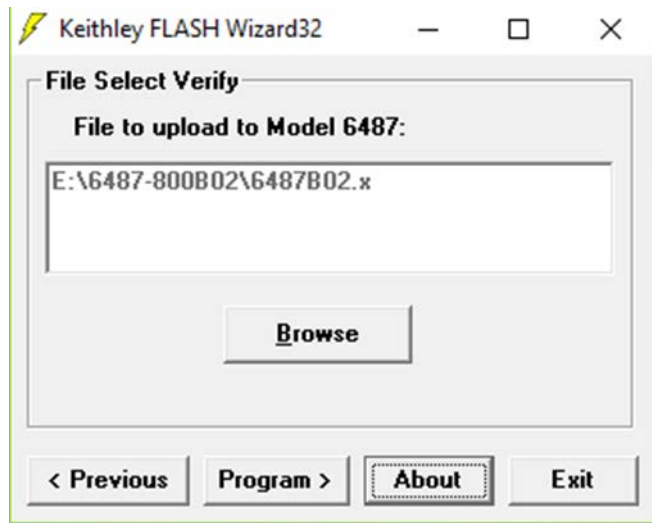


8. 点击 program 开始升级

升级过程中不要用任何方式中止固件升级

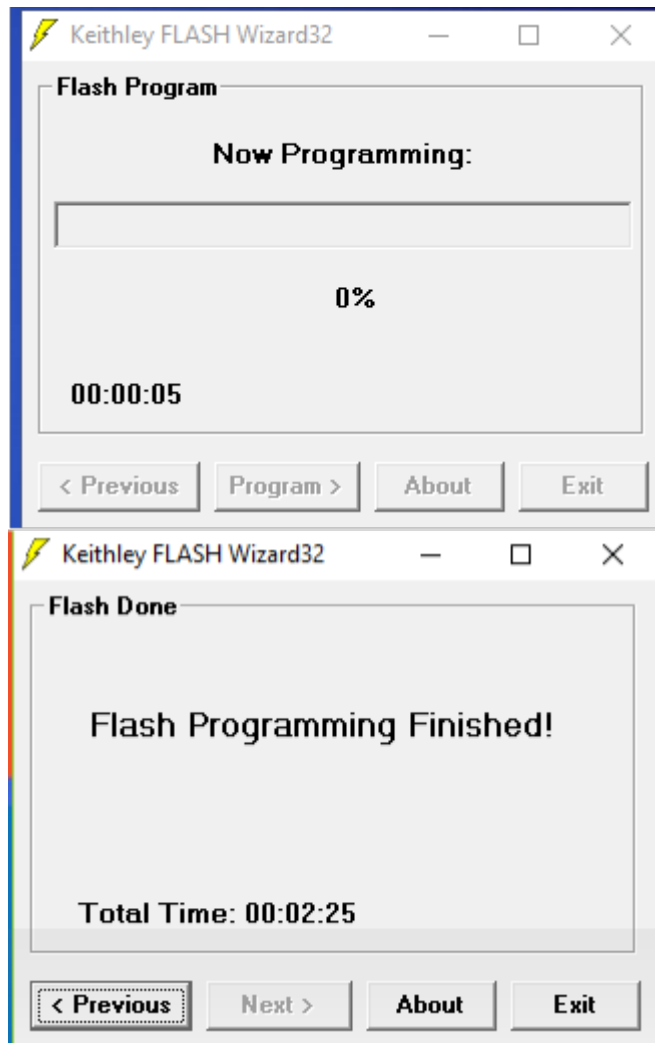

9. 升级完成后退出 flashwizard

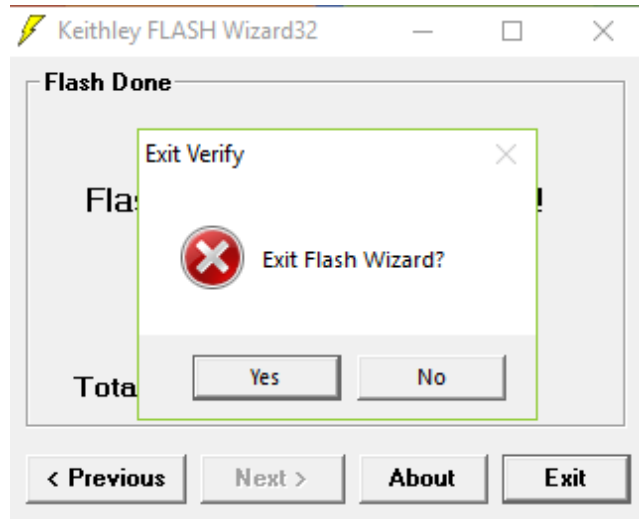

相关链接: N/A

附件: N/A

最近更新: 2020-02-20 1ht

顺颂商祺！

泰克亚太区技术支持部门

发送邮件给泰克，为您提供全面可靠的测试测量解决方案，原来解决问题可以这么简单快速，来信：

获取在线技术支持 400@tektronix.com

获取产品报价 426@tektronix.com

维修、延保、校准 china-service@tektronix.com

关注我们：cn.tek.com   